




**Modellstumpftrennplatten**  
*Truncated Model Parting-Plates*

**Beschreibung:** Modellstumpftrennplatten aus Edelstahl.  
**Anwendungsbereich:** Zum einfachen und sauberen Separieren bestimmter Abdruckpartien bei der Modellherstellung.

**Description:** *Truncated Model Parting-Plates of stainless steel.*  
**Field of application:** *For simple and exact separation of individual model parts during preparation of the model.*

Bestellnummer Order Number	Verpackungseinheit Unit
395	100 Stück 100 pieces

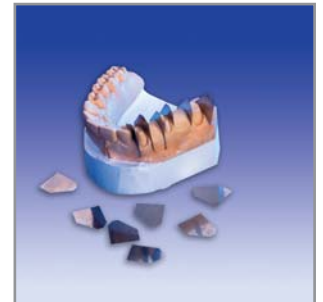


**Retentionsscheibe / Magnet / Magnettopf**  
*Retention Disc / Magnet / Magnet Holder*

**Beschreibung:** Retentionsscheibe, Magnet mit Magnettopf zur Herstellung von Split-Cast-Modellen.  
**Anwendungsbereich:** Retentionsscheibe im Modellsockel plazieren. Nach dem Sockeln des Zahnkranzes, wird der Magnettopf mit Magnet auf der Retentionsscheibe plaziert. Dieser Vorgang ermöglicht nach dem Einartikulieren eine einfache Entnahme, sowie ein präzises Zurücksetzen des Modells in den Artikulator.

**Description:** *Retention Disc, Magnet with Magnet Holder.*  
**Field of application:** *Place retention disc into the model baset. After basing the plaster casting, the magnet with magnet holder will be placed on the retention disc. This process enables a simple removal as well as precise replacement of the model after articulation.*

Bestellnummer Order Number	Verpackungseinheit Unit
100	Retentionsscheibe 50 Stück
100	Retention Disc 50 pieces
101	Magnet 50 Stück
101	Magnet 50 pieces
102	Magnettopf 50 Stück
102	Magnet Holder 50 pieces

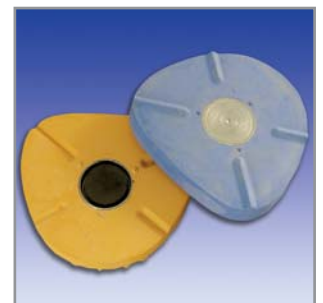

**Stumpflack**  
**Spacer**

**Beschreibung:** Sehr hochwertiger Stumpflack für alle Gipsarten und Gipsfarben.  
**Anwendungsbereich:** Bildet beim Auftragen auf die präparierten Zahnstümpfe eine gleichmässige Schichtstärke. Dient als Platzhalter und markiert eventuelle Gussrückstände beim Aufpassen des Gussobjektes. Zieht keine Fäden, optimaler Verbund, auch beim Abdampfen oder Reinigen des Modellstumpfes.



**Description:** High quality Spacer for all kinds of plaster and plaster colours.  
**Field of application:** Builds an even layer thickness and a smooth surface on the tooth stump. The spacer serves as place holder and marks possible casting arrears on the casting object. Does not produce threads optimal network properties of the spacer, also when cleaning the model stump.

Bestellnummer Order Number	Verpackungseinheit Unit
2001 blau / blue	1 Flasche a 10 ml / 1 phial of 10 ml
2002 gelb / yellow	1 Flasche a 10 ml / 1 phial of 10 ml
2003 gold / gold	1 Flasche a 10 ml / 1 phial of 10 ml
2004 klar / clear	1 Flasche a 10 ml / 1 phial of 10 ml
2005 rot / red	1 Flasche a 10 ml / 1 phial of 10 ml
2006 silber / silver	1 Flasche a 10 ml / 1 phial of 10 ml
2012 weiss / white	1 Flasche a 10 ml / 1 phial of 10 ml
2013 elfenbein / ivory	1 Flasche a 10 ml / 1 phial of 10 ml



**Verdünner / Thinner**

**Beschreibung:** Verdünner.  
**Anwendungsbereich:** Zum individuellen Bestimmen der Konsistenz von RISA Stumpflacken.

**Description:** Thinner.  
**Field of application:** To determine the individual consistence of RISA Spacers.

Bestellnummer Order Number	Verpackungseinheit Unit
2007 Verdünner standard Thinner standard	1 Flasche a 10 ml / 1 phial of 10 ml
2008 Verdünner, Goldlack Thinner, Spacer gold	1 Flasche a 10 ml / 1 phial of 10 ml





**Gipshärter**  
*Die-Hardener*

**Beschreibung:** Gipshärter 0 my.  
**Anwendungsbereich:** Zum Härten, Glätten und Versiegeln von Gipsoberflächen. Optimaler Schutz des Gipsstumpfes, speziell vor mechanischen Belastungen der Präparationsgrenzen. Versiegelung der Oberfläche ohne Schichtbildung. Sehr harte, wasserabweisende Oberfläche.

**Description:** *Die-Hardener 0 my.*  
**Field of application:** *To cure, smooth and seal the plaster surface. Optimal protection of the plaster stump, especially prior to mechanical load of the preparation border. Sealing of the surface without layer build-up. Very hard, water-resistant surface.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
2009	1 Flasche a 10 ml <i>1 phial of 10 ml</i>



**Sekundenkleber**  
*Second Glue*

**Beschreibung:** Sekundenkleber aus Cyanacrylat.  
**Anwendungsbereich:** Für Gips, Metall, Kunststoff und Keramik. Sehr kurze Abbindungszeit, minimaler Klebespalt, klebt innerhalb von Sekunden.

**Description:** *Second Glue with Cyanacrylat.*  
**Field of application:** *For plaster, metal, plastic and ceramic. Very short bonding time, minimum glue gap, sticks within seconds.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
2000	1 Flasche a 20 ml <i>1 phial of 20 ml</i>



Gipsmesser  
*Plaster Knife*

**Beschreibung:** Gipsmesser aus Edelstahl, mit Holzgriff.  
**Anwendungsbereich:** Zum Ablösen von Zahnkränzen aus der Abdruckmasse, sowie zum Brechen scharfer Gipskanten.

**Description:** *Plaster Knife, stainless steel, with wood grip.*  
**Field of application:** *To detach the plaster model from the casting and for breaking of sharp plaster edges.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1602	1 Stück <i>1 piece</i>



Gipsmesser "Gritman"  
*Plaster Knife "Gritman"*

**Beschreibung:** Gipsmesser "Gritman" aus Edelstahl mit Holzgriff.  
**Anwendungsbereich:** Zum Ablösen von Zahnkränzen aus der Abdruckmasse, zum Brechen scharfer Gipskanten.

**Description:** *Plaster Knife "Gritman", stainless steel with wood grip.*  
**Field of application:** *To detach the plaster model from the casting, to break off sharp plaster edges.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1603	1 Stück <i>1 piece</i>



Gips- und Anmischspateln  
*Plaster and Mix Spatulas*

**Beschreibung:** Gips- und Anmischspateln, Edelstahl.  
**Anwendungsbereich:** Zum anrühren von Gips, Alginat und Silikon problemlos zu reinigen.

**Description:** *Plaster and Mix Spatulas, stainless steel.*  
**Field of application:** *To mix plaster, algin and silicone. Easy to clean.*

Bestellnummer  
*Order Number*

Verpackungseinheit  
*Unit*

1601 1 Stück / 1 piece

1604 1 Stück / 1 piece


1605 1 Stück / 1 piece

1606 1 Stück / 1 piece

1607 1 Stück / 1 piece



1601

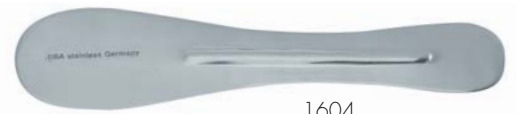

1604



1605



1606



1607



Gipsschneidezange  
*Plaster Cast Cutter*

**Beschreibung:** Gipsschneidezange aus Edelstahl.  
**Anwendungsbereich:** Zum Abtrennen und Herausbrechen von Gipspartien.

**Description:** *Plaster Cast Cutter, stainless steel.*  
**Field of application:** *To detach and break out plaster parts.*

Bestellnummer  
*Order Number*

Verpackungseinheit  
*Unit*

1610 1 Stück / 1 piece



**Modellsäge "Vario"**  
**Model Saw "Vario"**

**Beschreibung:** Modellsäge "Vario" mit Anspannschraube und individuell verstellbarem Bügel. Ergonomischer Griff für einfaches und sicheres handling.

**Anwendungsbereich:** Zum problemlosen und präzisen Sägen zwischen den einzelnen Zahnstümpfen, sowie zum Sägen von Wachsen und Hartmetallen.

**Description:** Model Saw "Vario" with clamping screw and individually adjustable frame. Ergonomic handle for simple and safe handling.

**Field of application:** For problem-free and precise sawing between the tooth stumps, as well as for sawing of wax and tungsten carbide.

Bestellnummer Order Number	Verpackungseinheit Unit
-------------------------------	----------------------------

1821	1 Stück 1 piece
------	--------------------



1821

**Modellsäge "abgewinkelt" oder "gerade"**  
**Model Saw "angled" or "straight"**

**Beschreibung:** Modellsäge "abgewinkelt" oder "gerade".

**Anwendungsbereich:** Zum Sägen von Stumpfmodellen. Optimale Sicht auf den Sägeschnitt durch Abwinkelung des Sägebogens. Ergonomischer Griff für einfaches und sicheres Handling.

**Description:** Model Saw "angled" or "straight".

**Field of application:** For sawing stump models. Optimal view on the saw cut by the angled saw bow. Ergonomic handle for simple and safe handling.



Bestellnummer Order Number	Verpackungseinheit Unit
-------------------------------	----------------------------

1838	abgewinkelt angled	1 Stück 1 piece
------	-----------------------	--------------------

1839	gerade straight	1 Stück 1 piece
------	--------------------	--------------------



1838



1839



**Modellsäge "standard"**  
*Model Saw "standard"*

**Beschreibung:** Modellsäge "standard" zum Sägen von Stumpfmodellen.  
**Anwendungsbereich:** Zum problemlosen und präzisen Sägen zwischen den einzelnen Zahnstümpfen.  
Der rutschsichere Griff, sowie das problemlose Einspannen der Sägeblätter runden das einfache Handling der RISA Modellsäge "standard" ab.

**Description:** Model Saw "standard" for making saw models.  
**Field of application:** For a problem-free and precise sawing between the tooth stumps.  
The nonslip handle, as well as easy clamping of the saw blades rounds up the simple handling of the RISA Model Saw "standard".

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1840	1 Stück <i>1 piece</i>



**Sägeblätter**  
*Saw Blades*

**Beschreibung:** Sägeblätter für RISA Modellsägen 1838, 1839 und 1840.  
**Anwendungsbereich:** Zum präzisen Sägen von Stumpfmodellen.

**Description:** Saw Blades for RISA Model Saw 1838, 1839 and 1840.  
**Field of application:** For precise sawing of stump models.

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Maße / Measure <i>Länge x Stärke x Höhe</i> <i>Length x Thickness x Height</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1841	75 x 0,12 x 5,0 mm	12 Stück Packung <i>12 pieces per packet</i>
1842	75 x 0,25 x 5,0 mm	12 Stück Packung <i>12 pieces per packet</i>
1843	75 x 0,20 x 3,0 mm	12 Stück Packung <i>12 pieces per packet</i>
1844	75 x 0,25 x 3,0 mm	12 Stück Packung <i>12 pieces per packet</i>





**Sägeblätter**  
*Saw Blades*

**Beschreibung:** Sägeblätter für RISA Modellsäge 1821.  
**Anwendungsbereich:** Zum präzisen Sägen von Stumpfmodellen, sowie zum Sägen von Wachsen und Hartmetallen.

**Description:** Saw Blades for RISA Model Saw 1821.  
**Field of application:** For precise sawing of stump models, as well as for sawing of wax and tungsten carbide.

**Sägeblätter für harte Metalle**  
*Saw Blades for hard metals*

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Maße / <i>Measure</i> Länge x Stärke x Höhe <i>Length x Thickness x Height</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1822	130 x 0,20 x 0,40 mm	144 Stück Packung <i>144 pieces per packet</i>
1823	130 x 0,24 x 0,48 mm	144 Stück Packung <i>144 pieces per packet</i>
1824	130 x 0,34 x 0,70 mm	144 Stück Packung <i>144 pieces per packet</i>
1825	130 x 0,40 x 0,85 mm	144 Stück Packung <i>144 pieces per packet</i>



**Sägeblätter für Wachse**  
*Saw Blades for wax*

1826	130 x 0,32 x 0,75 mm	144 Stück Packung <i>144 pieces per packet</i>
18227	130 x 0,36 x 0,85 mm	144 Stück Packung <i>144 pieces per packet</i>
1828	130 x 0,40 x 1,00 mm	144 Stück Packung <i>144 pieces per packet</i>



**Sägeblätter für Gipse**  
*Saw Blades for plaster*

1829	130 x 0,64 mm	144 Stück Packung <i>144 pieces per packet</i>
1830	130 x 0,80 mm	144 Stück Packung <i>144 pieces per packet</i>
1831	130 x 0,98 mm	144 Stück Packung <i>144 pieces per packet</i>
1832	130 x 1,05 mm	144 Stück Packung <i>144 pieces per packet</i>







**Hartmetall Kreissägeblatt**  
*Tungsten Carbide Circular Saw*

**Beschreibung:** Hartmetallkreissägeblatt.  
**Anwendungsbereich:** Zum präzisen Sägen von Stumpfmodellen.

**Description:** *Tungsten Carbide Circular Saw.*  
**Field of application:** *For precise sawing of stump models.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Maße <i>Measure</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
1850	63 x 0,3mm x 16mm	1 Stück / <i>piece</i>
1851	80 x 0,3mm x 19mm	1 Stück / <i>piece</i>



**Diamantscheibe "GalSiFlex"**  
*Diamond Disc "GalSiFlex"*

**Beschreibung:** Die RISA Diamant Scheibe "GalSiFlex", ist ähnlich einer Sinterscheibe, da der belegte Bereich komplett mit Diamant durchsetzt ist. Der wesentliche Vorteil der RISA "GalSiFlex-Scheibe" im Vergleich zu einer Sinterscheibe besteht jedoch in der sehr dünnen Schnittbreite und ihrer hohen Flexibilität. Die RISA "GalSiFlex-Scheibe" hat genau wie die Sinterscheibe eine sehr hohe Lebensdauer.

**Anwendungsbereich:** Zum präzisen Trennen und Separieren einzelner Stümpfe und Gips-Partien, sowie von Keramik oder Goldlegierungen.

**Description:** *The RISA Diamond Disc "GalSiFlex" is similar to a sinter disc. The coated range is completely accomplished with diamond, however with the essential advantage, that this disc - compared to a sinter disc - has a very thin slice and is very flexible. The RISA "GalSiFlex Disc" has a very high working life just like a sinter disc.*

**Field of application:** *For precise separation of individual stumps and plaster parts, as well as ceramic or gold.*

Bestellnummer <i>Order Number</i>	Maße <i>Measure</i>	Verpackungseinheit <i>Unit</i>
HP 354/140F F= fein / <i>fine</i>	140mm x 0,17mm	1 Stück / <i>piece</i>
HP 354/200PQF F= fein / <i>fine</i>	200mm x 0,17mm	1 Stück / <i>piece</i>
HP 354/200M M= mittel / <i>medium</i>	200mm x 0,17mm	1 Stück / <i>piece</i>
HP 354/300XG XG= x-grob / <i>x-coarse</i>	300mm x 0,30mm	1 Stück / <i>piece</i>
HP 354/450XG XG= x-grob / <i>x-coarse</i>	450mm x 0,30mm	1 Stück / <i>piece</i>

