



Sägeblätter für die Knie- und Hüftendoprothetik

RISA Knie- und Hüftsägeblätter überzeugen durch erstklassige Schneidleistung. Einzeln diamantgeschliffene Zähne garantieren mühelose, präzise Schnitte. Die Blattstärke ist optimal auf das jeweilige System aller gängigen Knieimplantate abgestimmt. Durch die perfekte Schneidleistung kann das Risiko einer thermischen Nekrose nahezu ausgeschlossen werden.

Saw Blades for Knee and Hip Endoprosthetics

RISA knee and hip saw blades provide top class cutting performance. Individually diamond polished teeth guarantee effortless precision cuts. The blade thickness is ideally coordinated in line with the systems of all commonly used types of knee implant. By ensuring perfect cutting results, the risk of thermal necrosis can be almost completely eliminated.



Sägeblätter für die kleine Knochenchirurgie

RISA Sägeblätter sind perfekt ausgerichtet für filigrane Arbeiten in der Hand- und Fußchirurgie. Die geschränkte Verzahnung und die exakt in einer Flucht liegenden Zähne ermöglichen feinste präzise Schnitte bei minimalem Knochenabtrag.

Saw Blades for Small Bone Surgery

RISA saw blades are ideally aligned to facilitate the delicate work processes involved in hand and foot surgery. The crossed teeth are arranged in a precise row to ensure ultra-fine cuts coupled with minimal bone abrasion.





Aufbereitung

Alle Sägeblätter sind maschinell wiederaufbereitbar und für die Dampfsterilisation im fraktionierten Vakuum ausgelegt (gem. DIN EN ISO 17665-1).

Nähere Informationen können Sie unserer Gebrauchs- und Aufbereitungsanleitung entnehmen.

Processing

All saw blades can be mechanically reprocessed and are designed for steam sterilization in fractionated prevacuum (as defined by DIN EN ISO 17665-1).

For more details, please refer to our directions for use and processing instructions.






Maximale Leistung durch hochwertige Beschichtungen *Top-Quality Coatings for Maximum Performance*

Alle RISA-Sägeblätter sind komplett oder teilweise beschichtet erhältlich.
All RISA saw blades are available with complete or partial coating.

Golden Cut

Beschichtete Zähne für höhere Standzeiten und Schutz vor Verschleiß.
Coated teeth for optimum endurance and protection against wear.

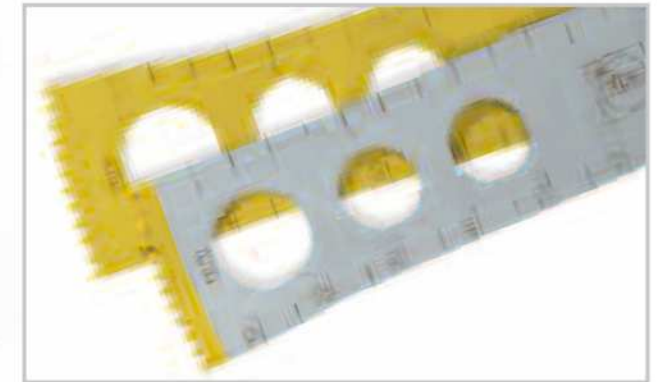

Black Cut

Extrem präziser Lauf durch hervorragende Gleiteigenschaften.
Minimaler Abrieb in der Führung.
Extreme running precision due to excellent sliding properties.

Alle Beschichtungen sind biokompatibel und lebensmittelecht.
All coatings are biocompatible and food safe.

